


televic

AQURA Essentials, il cuore della Chiamata Infermiera

Il nostro sistema di chiamata infermiera
entry level, aggiornabile e versatile
dove la qualità incontra il prezzo.



HEALTHCARE

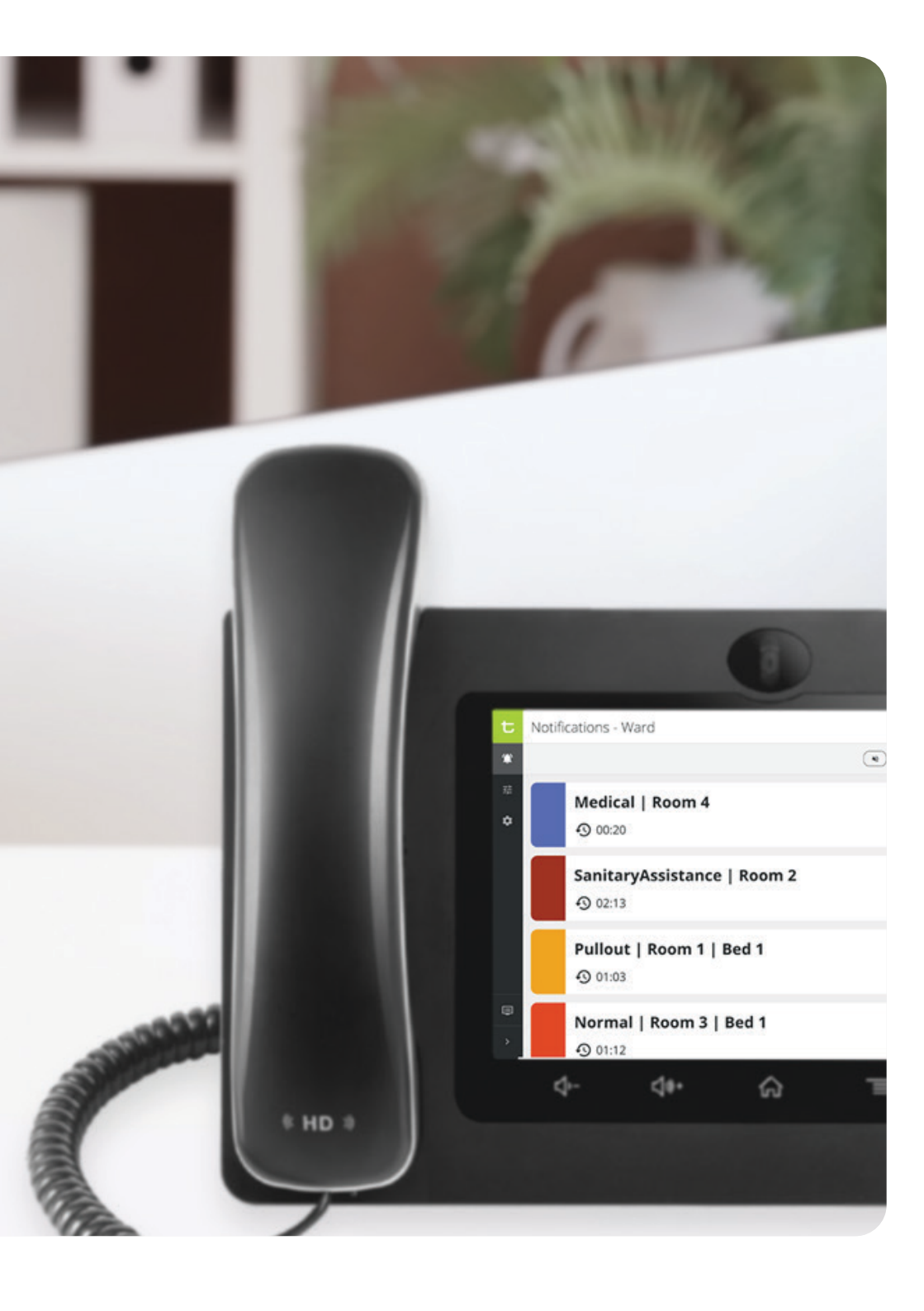

Notifications - Ward

- Medical | Room 4**
🕒 00:20
- SanitaryAssistance | Room 2**
🕒 02:13
- Pullout | Room 1 | Bed 1**
🕒 01:03
- Normal | Room 3 | Bed 1**
🕒 01:12

HD

AQURA Essentials

Scoprite il sistema di chiamata infermieri entry level di Televic Healthcare, aggiornabile e versatile. Una risposta economica alle attuali sfide delle varie organizzazioni sanitarie, con vantaggi per tutti i soggetti interessati.



Sistema di Chiamata Infermiera affidabile e sicuro



User-friendly
per operatori, pazienti e tecnici




Innovativo
Plug-and-play: Molto facile da installare, non è necessario un server



Robusto
alta qualità dei materiali e tecnologia specifica per ambienti rivolti alla cura dei pazienti




Aggiornabile
alla Piattaforma AQURA care

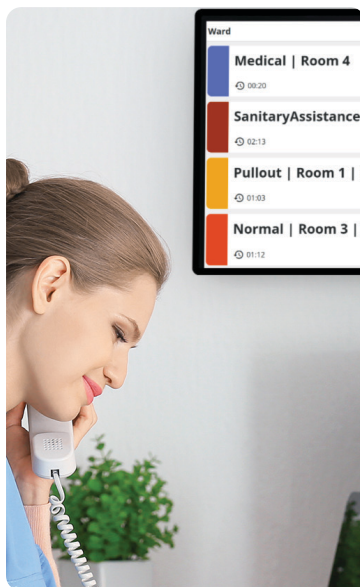

Proteggi il tuo investimento e aggiorna alla Piattaforma AQURA Care


Nel corso del tempo le esigenze della vostra organizzazione cambiano, AQURA cresce con voi. In qualsiasi momento è possibile aggiornare la piattaforma AQURA Care semplicemente aggiungendo un server e le licenze necessarie. Non è necessario modificare l'hardware o il cablaggio. Goditi i vantaggi:

- › Portabilità degli allarmi su smartphones
- › Distribuzione intelligente degli allarmi
- › Approfondimenti e statistiche attraverso il nostro dashboarding
- › Integrazione con sistemi terzi attraverso applicazioni e sensori

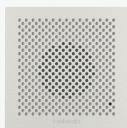

Unità Interfonica digitale intelligente

- › Audio digitale Full duplex
- › Intelligibilità Cristallina: cancellazione dell'eco e soppressione del rumore
- › Interfonia digitale a mani libere

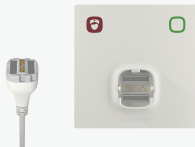

Presa singola intelligente con pulsante di chiamata e cancellazione

- › Connettore magnetico con contatti a molla, risparmio assicurato
- › Facile assegnazione del letto
- › Gestione integrata delle luci
- › Rilevazione di un allarme da contatto pulito
- › Controllo oscuranti attraverso I/O
- › Distinzione degli allarmi per letto



Perelle di chiamata e cavo di monitoraggio

- › 1 pulsante: solo chiamata infermiera, 3 pulsanti: chiamata infermiera con controllo della luce, 5 pulsanti: chiamata infermiera con controllo della luce e delle tende o tapparelle
- › Retroilluminata per ricerca al buio
- › Materiali fiamma-ritardanti e antistatici
- › Grado di Protezione IP68



Gli infermieri possono concentrarsi sugli ospiti o sui pazienti, grazie all'interfaccia utente intuitiva.




Unità di chiamata per chiamate normali, sanitarie o di assistenza

- › Retroilluminata per ricerca al buio (LED)
- › Icona Infermiera per distinzione corretta
- › Luce di rassicurazione




Componenti di AQURA Essentials

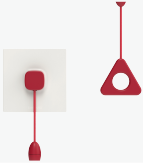

Unità a tirante per chiamate da bagno, normali o di assistenza

- › Retroilluminata per ricerca al buio (LED)
- › Icona Infermiera per distinzione corretta
- › Luce di rassicurazione
- › Opzionale: IP54

- › Plug-&-play
- › Design concavo per evitare falsi allarmi
- › Nessun ricettacolo di sporco, resiste ai raggi UV e disinfettanti

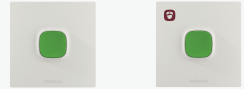

Unità di presenza e cancellazione

(Con pulsante laterale rosso opzionale)

- › Retroilluminata per ricerca al buio (LED)
- › Inoltro di default delle chiamate (buzzer)



Lampada fuori porta con elettronica integrata (HUB)

- › Chiara distinzione degli allarmi
- › Tecnologia LED
- › 5 colori:
 - ROSSO (primo campo)
 - VERDE (secondo campo)
 - GIALLO o BIANCO (terzo campo)
 - BLUE o BIANCO (quarto campo)
- › Funzionamento locale in caso di guasto del sistema





Sistema Innovativo

AQURA Essentials vi permette di ottimizzare il vostro investimento nel tempo: è una soluzione scalabile che cresce con voi in base alle esigenze della vostra organizzazione.

› Tipologia di allarmi riconosciuti:

- Normale
- Sgancio Perella
- Bagno
- Monitoraggio
- Assistenza
- Assistenza in Bagno
- Chiamata Medico

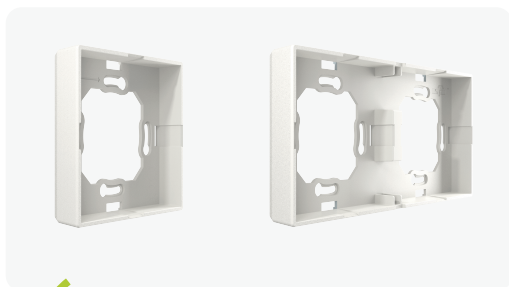

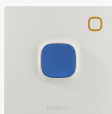

Unità intelligente per chiamata medico

- › Pulsante blu per chiamata medico o rianimazione
- › Pulsante giallo per reset allarme
- › Retroilluminata per ricerca al buio (LED)
- › Luce di rassicurazione



Controller di Reparto

Il controllore del reparto è l'unità di controllo e comunicazione:

- › Capacità fino a 40 camere per reparto
 - › Facile assegnazione delle stanze: non è necessaria alcuna programmazione
 - › Meccanismo di fallback alla modalità ambiente nel caso in cui il controllore di reparto venga isolato dal sistema
 - › Possibilità di dividere il reparto in 2 rami per una maggiore affidabilità
- Montabile su barra DIN



Signage

L'applicazione web di AQURA

Essentials visualizza i 4 allarmi attivi più importanti, in tempo reale, sul display di vostra scelta:

- › Mostra la durata di ogni chiamata attiva
- › Ripete il ritmo sonoro della chiamata con la priorità più alta.
- › È possibile disattivare la suoneria nel caso in cui risulti fastidiosa.



Le unità modulari e a incastro possono essere installate facilmente e sono plug-and-play.



Quadro di alimentazione

Questo quadro di alimentazione precabato è composto dalle seguenti unità:

- › Controllore di reparto con alimentazione separata e protetta
- › Fusibile incorporato per l'alimentazione principale (con interruttore on/off)
- › 2 alimentatori interni protetti per i due possibili BUS di reparto
- › Opzionale: compatibile con UPS (gruppi di continuità)



Postazione Infermiera

Un dispositivo telefonico di facile utilizzo con un'interfaccia touch interattiva Android, che mostra tutti gli allarmi attivi del reparto e consente conversazioni interfoniche con la stanza del paziente o a livello del letto.

- › Un unico dispositivo per l'interfono, il monitoraggio e la gestione interattiva degli allarmi
- › Facile configurazione della lingua locale per i vari tipi di allarme e per l'interfaccia utente.
- › Priorità automatica degli allarmi
- › Fare clic sull'allarme e attivare direttamente una chiamata interfonica.
- › Indicazione dei tempi di attesa
- › Regime diurno e notturno per i volumi audio
- › Storico delle chiamate fino a 24 ore
- › Funziona su Android, garantendo una gestione fluida e intuitiva.
- › Disponibile in due misure: 7 o 8 pollici



IO extender

Extender IO per il controllo degli oscuranti e una maggiore flessibilità di cablaggio quando si utilizza il controllo luce o oscuranti.

televic



La sicurezza e la felicità dei vostri ospiti, pazienti e infermieri è la nostra priorità principale.



HEALTHCARE



Televic Healthcare
Leo Bekaertlaan 1
B-8870 Izegem, Belgium
+32 51 30 30 45
global.healthcare@televic.com
www.televic.com/healthcare