

televic

## AQURA Essentials, le coeur de l'appel infirmière

Notre système d'appel infirmière d'entrée de gamme, évolutif et polyvalent, où la qualité rencontre le prix.



HEALTHCARE

## Un concept innovant :

- › Très facile à installer : aucune connaissance préalable de l'appel infirmière nécessaire
- › Détection automatique : aucune configuration nécessaire
- › Unités : boutons d'appel et prises
  - Cliquables pour une installation rapide
  - Conception concave évitant les fausses alarmes
  - Pas d'interstice de saleté
- › Retour intelligent au mode chambre indépendant en cas de défaillance du système
- › Identification de l'appel par lit
- › Différents types d'alarmes :
  - Normal • Arrachement • Sanitaire • Surveillance
  - Assistance • Assistance sanitaire • Médicale



**Fiable**  
un système d'appel infirmière sûr



**Facile à utiliser**  
pour l'infirmière, le technicien et le patient/résident



**Innovant**  
grâce à la technologie et à la conception avancées



**Robuste**  
avec des matériaux de haute qualité conçus pour les environnements de soins et de cures



**Évolutif**  
vers la plateforme complète de soins AQURA




# AQURA Essentials

Découvrez le système d'appel infirmière d'entrée de gamme évolutif et polyvalent de Televic Healthcare. Une réponse économique aux défis actuels des organisations de soins de santé, avec des avantages pour chaque partie prenante.

## Opter pour AQURA Essentials signifie :

- › Système d'appel infirmière plug & play
- › Aucun serveur nécessaire
- › Capacité jusqu'à 40 chambres par contrôleur de salle
- › Distinction d'alarmes par lit
- › Affichage des alarmes entièrement personnalisable
- › Renvoi d'appel des infirmières dans votre service
- › Poste d'infirmière tactile intuitif
- › Intercom numérique "mains libres"
- › Désinfectable et résistant aux UV

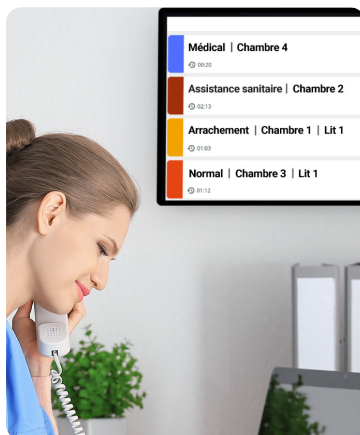

## Protégez votre investissement et passez à la plateforme AQURA Care

Au fil du temps, les besoins de votre organisation changent, l'AQURA évolue avec vous. A tout moment, vous pouvez passer à la plateforme AQURA Care en ajoutant simplement un serveur et les licences nécessaires. Aucun changement de matériel, ni de câblage n'est nécessaire :

- › Alarmes mobile sur les smartphones
- › Distribution intelligente des alarmes
- › Plateforme ouverte aux applications et capteurs tiers
- › Intégration avec des applications et des capteurs tiers



### Unité d'interphone intelligente

- › Audio numérique full duplex
- › Clair comme du cristal : annulation de l'écho et suppression du bruit



### Prise unique intelligente avec bouton d'appel et d'annulation

- › Connecteur magnétique économique avec contacts secs
- › Affectation facile des lits
- › Contrôle de l'éclairage de lits et chambre
- › Capacité à détecter une alarme par contact sec
- › Contrôle des stores en combinaison avec le prolongateur IO




### Poires d'appel et câble de surveillance

- › 1 bouton : appel infirmière seulement, 5 boutons : appel infirmière avec commande de l'éclairage et des volets
- › Guidage nocturne
- › Indice IP67



Les infirmières peuvent se concentrer sur les résidents ou les patients, grâce à l'interface utilisateur intuitive.

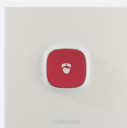


### Unité d'appel pour les appels normaux, sanitaires ou d'assistance

- › Symbole infirmier pour une différenciation facile
- › Lumière de tranquillisation
- › Lampe de poche intégrée (LED)




# Composants de l'AQURA Essentials

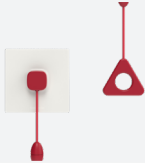

Unité à cordon pour les appels sanitaires, normaux ou d'assistance

- › Symbole infirmier pour une différenciation facile
- › Lumière de tranquillisation
- › En option : IP54
- › Lampe de poche intégrée (LED)

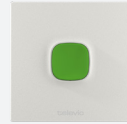

Unité de présence infirmière et d'annulation d'appel

- › LED de tranquillisation
- › Renvoi d'appel infirmière par défaut (buzzer)




Lampe de porte avec hublot intégré

- › Distinction claire des alarmes
- › La technologie LED
- › 5 couleurs :
  - Rouge (première rangée)
  - Vert (deuxième rangée)
  - Jaune ou blanc (troisième rangée)
  - Bleu ou blanc (quatrième rangée)
- › Retour intelligent au mode local en cas de défaillance du système



# Un système innovant

AQURA Essentials vous permet d'optimiser votre investissement au fil du temps : il s'agit d'une solution évolutive qui grandit avec vous au fur et à mesure que les besoins de votre organisation changent.

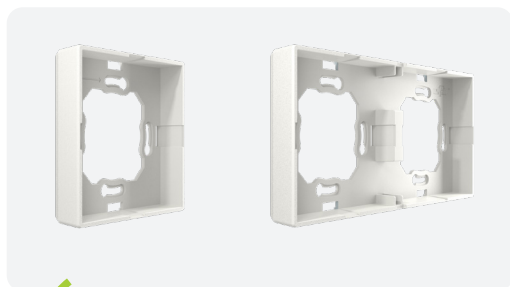



### Unité intelligente pour l'alarme médicale


- › Bouton bleu avec voyant intégré pour l'alarme médicale ou de réanimation
- › Bouton jaune pour réinitialiser l'alarme
- › Lampe de poche intégrée (LED)
- › Lumière de réassurance



### Contrôleur de service intelligent

Le contrôleur de service est l'unité de commande et de communication :

- › Capacité jusqu'à 40 chambres par service
- › Attribution facile des pièces : aucune programmation nécessaire
- › Mécanisme de repli sur le mode local en cas d'isolement du contrôleur de salle par rapport au système
- › Possibilité de diviser la circonscription en deux branches pour plus de fiabilité
- › Montage sur rail DIN

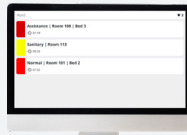

### Signalisation

L'application web AQURA Essentials visualise les 4 alarmes actives les plus élevées, en temps réel, sur l'écran de votre choix :

- › Affichez la durée d'activité de chaque appel
- › Répétez un rythme sonore de l'appel ayant la plus haute priorité
- › Coupez le rythme sonore au cas où il serait dérangement



Les unités modulaires et cliquables peuvent être facilement installées et sont prêtes à l'emploi.



Recevez tous les événements et alarmes sur votre smartphone en passant à la plateforme AQURA Care



### Téléphone tactile du poste d'infirmière

Un téléphone facile d'utilisation doté d'une interface tactile Android interactive, affichant toutes les alarmes actives du service et permettant des conversations par interphone avec la chambre du patient ou au niveau du lit.

- › Un seul appareil pour l'interphone, la surveillance et la gestion des alarmes interactives
- › Configuration facile de la langue locale pour les types d'alarme et l'interface utilisateur
- › Priorité automatique des alarmes
- › Cliquez sur l'alarme et établissez directement un appel intercom
- › Indication du temps d'attente
- › Régime de jour et de nuit pour les volumes audio
- › Historique des appels sur 24 heures
- › Fonctionne sous Android, ce qui garantit une utilisation fluide et intuitive
- › Disponible en deux tailles : 7 ou 8 pouces



### Extender IO

Extension IO pour commande volet et flexibilité accrue du câblage lors de l'utilisation de la commande lumière ou volet.



# televic



La sécurité et le bonheur de vos résidents, patients et infirmières sont notre priorité.



HEALTHCARE



**Televic Healthcare**  
Leo Bekaertlaan 1  
B-8870 Izegem, Belgique  
+32 51 30 30 45  
[global.healthcare@televic.com](mailto:global.healthcare@televic.com)  
[www.aqura-essentials.com/fr](http://www.aqura-essentials.com/fr)